

Faeces Hemoglobin F-Hb

NADAL® FOB

Patientinstruktion egenprovtagning


Inför provtagningen behövs:

- Remiss; elektronisk (Cosmic-etikett) eller pappersremiss.
- Provtagningsrör från NADAL FOB Test Ref. 272001.
- Om provet ska skickas med post behövs: transporthylsa och vadderat kuvert med adress och porto.

Prov ska inte samlas från patienter då de har sin menstruationsperiod, inte heller 3 dagar före och efter menstruationsperioden. Prov ska inte samlas vid blödande hemorrojder, blod i urinen eller om patienter känner ansträngningar vid tarmrörelser. Alkohol, aspirin (acetylsalicylsyra) och andra läkemedel som tas i excessiva mängder kan orsaka gastrointestinal irritation vilket kan resultera i ockult blödning. Man bör inte använda dylika substanser 48 timmar före provtagning.

Gör så här:

1. Förvara provtagningsrör i rumstemperatur före användning.
2. Märk röret, eventuell transporthylsa samt pappersremiss om sådan finns, med namn, personnummer och provtagningsdatum. **Tre på varandra följande prov, tagna olika dagar, krävs för säker diagnostik**
3. Samla avföring på ett toalettpapper eller i ett sterilt engångskärl. Undvik att späda ut avföringen med urin eller vatten från toaletten.
4. Håll provtagningsröret upprätt och öppna den blå korken. Akta så att inte buffert rinner ut!
5. Ta ut provuppsamlingspinnen (spiral-pinne).
6. Samla prov genom att sticka ner provuppsamlingspinnen på tre olika ställen i avföringsprovet. Avföring endast i skårorna.
7. Placera provuppsamlingspinnen som nu innehåller avföring tillbaka till provtagningsröret och skruva åt ordentligt.
8. Skaka provet för att provmaterialet ska blandas med buffert.
9. Analys bör ske så snabbt som möjligt. Lämna inte prov i rumstemperatur under längre perioder. Transport i rumstemperatur till laboratoriet kan utföras utan problem men bör inte överstiga 2 timmar. Förvaringstid i kyl bör inte överstiga 7 dygn.

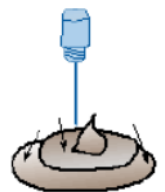

Vid frågor ring: Klinisk kemi, 063-15 41 30